

# BE Light Micro



É a nova solução para EEG/PSG pela EBNeuro. O dispositivo de gravação é confiável, compacto, leve, durável e confortável mais importante para o seu paciente.

BE Micro é totalmente capaz de executar EEGs/PSGs de alta qualidade, convencionais e monitorização de EEG ambulatorial.

BE Micro, além da gravação de alta qualidade de eletroencefalogramas e polissonografia, simultaneamente monitora a saturação de oxigênio e eletrocardiograma.

## Conectividade e Integração

---

Utilizando a conexão USB, BE Micro pode ser utilizado em ambientes clínicos mais comuns, incluindo salas de exame, as áreas de testes de neurologia, leitos hospitalares, etc, Nenhum eletrodo especial é necessário, a maioria dos eletrodos/acessórios de EEG/PSG existentes são compatíveis com o BE Micro.


A tela LCD iluminada permite o técnico observar o sinal EEG/PSG registrado, os parâmetros de aquisição, testar e verificar os níveis de impedância. O processo de aplicação é indolor e eficaz com as funções amigáveis do BE Micro.

BE Micro também dispõe de um joystick multifunções que permite o acesso rápido ao paciente a um indicador de eventos. O relógio digital é claramente visível e o botão de eventos está convenientemente localizado no dispositivo de gravação. Com a ativação do evento propriamente dito, o EEG/PSG adquirido é "marcado" no traçado no exato momento do contato.

Durante uma gravação de EEG/PSG ambulatorial, documentação de tempo específico de "eventos" são de extrema importância tanto para o paciente como para o médico de interpretação.



EEG solution now in your hand

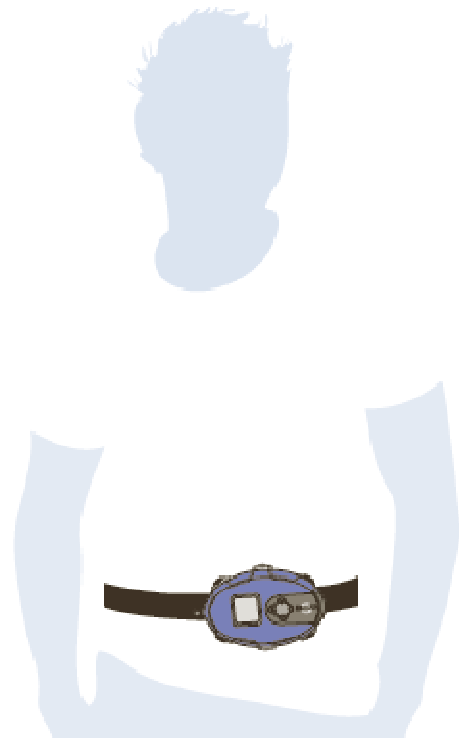

Comfortable for your patient

### Software NT Galileo

---

BE Micro é compatível com o programa Galileo, software que executa várias funções clínicas, científico e de transformação. As ferramentas do software Galileo permitem funções para a maioria dos pós-processamento de dados, incluindo filtragem, análise espectral e mapas cerebrais, promediação retroativa, detecção automática de espículas e crises, DSA, CSA, polissonografia, etc.

As informações são processadas com rapidez e eficiência em grande parte devido à alta qualidade do sinal adquirido com o BE Micro.

### Acessórios


---

- BE Micro bolsa
- Oxímetro
- BE Micro touca/capuz (10-20 padrão)
- BE Micro cabo do paciente (10-20 padrão)
- Módulo de caixa de entrada plug-in



### Paciente cabo 20/10

---

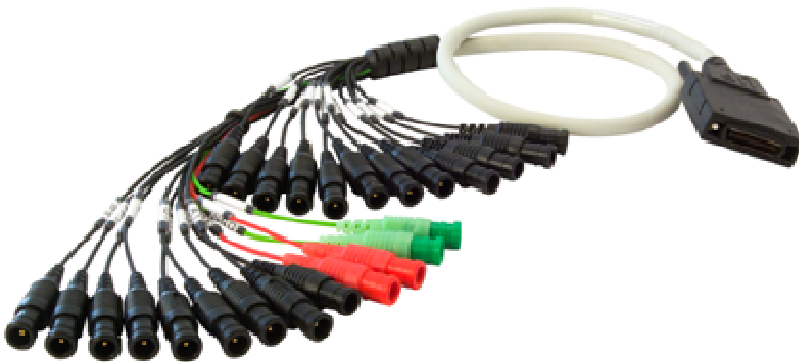

### Conexão de plugue de Segurança

---



EBNeuro S.p.A.  
Via Pietro Fanfani 97/A  
50127 Firenze ITALY  
Phone: +39 (055) 4565111  
Fax: +39 (055) 4565123  
[www.ebneuro.com](http://www.ebneuro.com)

SPMédica, Científica e Comercial Ltda  
Av. Ipiranga, 104, cj.171/172  
Edifício Imperium  
República  
São Paulo, SP, Brasil  
Tel./Fax.: (55)(11)3259.2657 / 3259.2751  
[www.spmedica.com.br](http://www.spmedica.com.br)